

STERANIOS 2%

Desinfectante
de Alto Nivel /
Esterilizante en frío



- Solución lista para el empleo: ausencia de activador
- Activo en bacterias, levaduras, mohos, virus y microbacterias en 10 minutos
- Activo en esporas de bacterias en 1 hora
- Verificación de la eficacia del baño por tirita específica (cada 4 horas)

INDICACIONES

Desinfectante de alto nivel / Esterilizante en frío de dispositivos médicos, material quirúrgico y médico, material de endoscopia y material termosensible.

CARACTERÍSTICAS

- Conservación del baño 30 días
- Solución límpida de color verde.
- Activo en Helicobacter pylori
- Solución al 2% de Glutaraldehído tamponada a pH6 (Citrato de sodio)
- STERANIOS 2% NG y STERANIOS 2% ECS son fórmulas con compuestos que limitan y controlan la evaporación del glutaraldehído.
- Esporicidia completa (5 log de reducción).
- Amplia compatibilidad con todo tipo de materiales.
- Caducidad: 3 años a partir de la fecha de fabricación.
- Se utiliza en asociación con todo tipo de producto de limpieza pre-desinfectante.

PRÉSTAMO
A EL EMPLEO






STERANIOS 2%

STERANIOS 2% NG - STERANIOS 2% ECS

Desinfectante de Alto Nivel / Esterilizante en frío

MODO DE EMPLEO

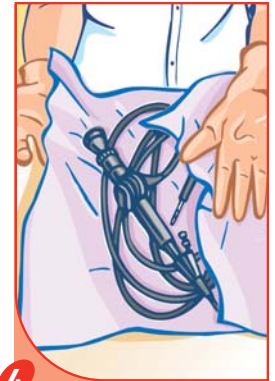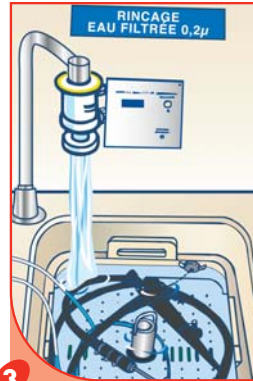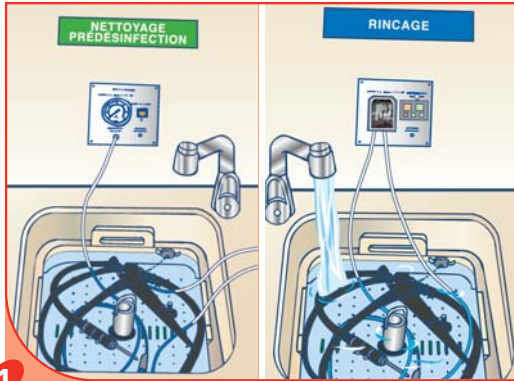

Etapa de predesinfección: Limpiar el dispositivo médico con un producto tipo ANIOSYME DD1, HEXANIOS G+R, o ANIOSYME PLA II. Aclarar cuidadosamente. Para el material endoscópico: Limpiar con escobillón e irrigar.

Etapa de desinfección: Verter la solución. Cubrir el recipiente. **Tiempo de contacto 10 min.** o 1 hora según la actividad deseada. **Tiempo de conservación máximo del baño: 30 días**

Aclarar cuidadosamente el dispositivo médico con agua estéril o filtrada (0,2µm). Para el material endoscópico: exterior e interior.

Secar con un tejido estéril limpio. Conservar el dispositivo médico lo más asépticamente posible hasta nueva utilización.

COMPOSICIÓN CUALITATIVA

STERANIOS 2% es una solución de glutaraldehído al 2% (expresada en materia activa al 100%), tamponada al pH 6 en presencia de un catalizador de efectos de superficie. STERANIOS 2% NG y STERANIOS 2% ECS contienen 2 compuestos que, en asociación, limitan la evaporación de glutaraldehído.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Peligroso. Respetar las precauciones de empleo (establecidas según la Directiva 99/45/CE y sus adaptaciones). Almacenamiento: de +5°C a +30°C. Dispositivo médico de clase IIb (Directiva 93/42/CEE modificada).

ACONDICIONAMIENTOS

- 1 STERANIOS 2% 4 bidones de 5L.....Ref 382.034
- 2 STERANIOS 2% NG 4 bidones de 5L.....Ref 383.034
- 3 STERANIOS 2% ECS 4 bidones de 5L.....Ref 710.034

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

Activo en	Normas	Tiempo de contacto
Bacterias	EN 1040, EN 13727, NF T 72-171	5 min.
	NF T 72-190	10 min.
	Helicobacter pylori	10 min.
Mycobacterias	Mycobacterium tuberculosis (B.K.)	5 min.
	EN 14348 (M. terrae, M. avium) pr EN 14563 (M. terrae)	10 min.
Levaduras / Mohos	EN 1275,	10 min.
	EN 13624, NF T 72-190	10 min.
Virus	HIV-1, HBV, Herpes virus, BVDV (virus modelo HCV)	5 min.
	NF T 72-180	10 min.
Esporas	NF T 72-230	1 hora
	T 72-301 (C. difficil)	30 min.



Insumos Para Esterilización

Av. Lope de Vega 1252
(1407) CABA- Buenos Aires- Argentina
Tél./Fax +54 011 4648-2261
www.ipeinsumos.com.ar